

ரேபிட் ஆன்டிஜென் சோதனையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

சோதனை வழிமுறைகள் கருவிகளின் வகைகளை பொறுத்து மாறுபடும். பல விரைவான ஆன்டிஜென் சோதனைக் கருவிகள் பொதுவாக கீழே உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன, ஆனால் அனைத்தும் இல்லை. உற்பத்தியாளரின் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

ஒரு மாதிரியை சேகரித்தல்



பையில் இருந்து ஒரு நாசி துடைப்பானை எடுக்கவும்.



மூக்கின் விளிம்பிலிருந்து 2-3 செமீ வரை உங்கள் நாசியில் ஒன்றில் துடைப்பைச் செருகவும்.



மெதுவாக துடைப்பானை நாசியின் மேற்பரப்பில் 5 முறை உருட்டவும். அதே துடைப்பானைப் பயன்படுத்தி, மற்ற நாசியில் இதே முறையை மீண்டும் செய்யவும்.



உங்கள் முடிவைப் பார்க்க சரியான நேரத்தை உறுதிப்படுத்த தொகுப்பு பெட்டி வழிமுறைகளை சரிபார்க்கவும். இது தொகுப்புப் பெட்டியை பொறுத்து மாறுபடலாம்.

மாதிரியை சோதனை செய்தல்



பிரித்தெடுக்கும் குப்பியின் மேற்புறத்தில் இருந்து அலுமினியத் தகடுத்திரையை பிரிக்கவும்.




பிரித்தெடுக்கும் குப்பியில் துடைப்பானை வைக்கவும். துடைப்பானை குறைந்தது 5 முறை தீவிரமாக சுழற்றவும்.




குப்பிக்கு எதிராக சுழற்றுவதன் மூலம் துடைப்பானை அகற்றவும், அதே நேரத்தில் பக்கங்களை அழுத்துவதன் மூலம் திரவத்தை துடைப்பானிலிருந்து விடுவிக்கவும்.



வழங்கப்பட்ட தொப்பியுடன் குப்பியை மூடி, குப்பியின் மீது உறுதியாக அழுத்தவும். குழாயின் அடிப்பகுதியை அசைப்பதன் மூலம் நன்கு கலக்கவும்.

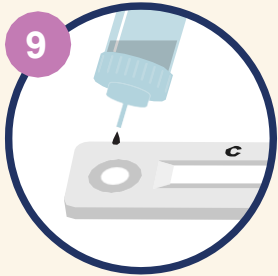

குப்பியை தலைகீழாக வைத்து, மாதிரி குழிமேல் நன்றாக பிடித்து, குப்பியை மெதுவாக அழுத்தவும். தொகுப்பு அறிவுறுத்தல்களின்படி தேவையான சொட்டுகளை மாதிரி குழியில் விழ அனுமதிக்கவும்.

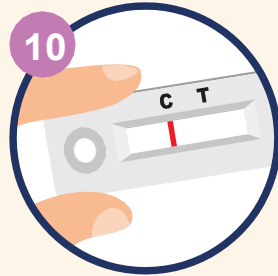

உங்கள் சோதனை முடிவைச் சரிபார்க்க, தொகுப்பு வழிமுறைகளைச் சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நேரத்தைப் பின்பற்றவும்.

உங்கள் முடிவைத் தெரிந்து கொள்ளுதல்


எதிர்மறை

C க்கு அடுத்ததாக ஒரு கோடு சோதனை எதிர்மறையாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.




நேர்மறை

C மற்றும் T க்கு அடுத்து கோடுகள் (மங்கலான கோடுகள் கூட) இருந்தால் சோதனை நேர்மறையானது என்பதைக் குறிக்கிறது.

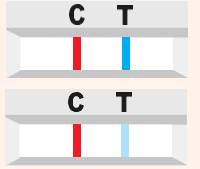

தவறான முடிவு

C க்கு அடுத்து எந்த கோடும் இல்லையென்றால் சோதனை தவறானது.

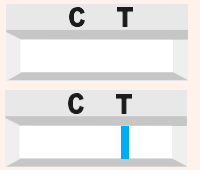

உங்கள் முடிவைப் பதிவு செய்தல்

உங்கள் முடிவைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இதை எனது கோவிட் பதிவில் செய்யலாம். mycovidrecord.health.nz இல் உள்நுழையவும் அல்லது 0800 222 478 ஐ அழைக்கவும் மற்றும் விருப்பம் 3 ஐ அழுத்தவும்.

நீங்கள் நெருங்கிய

தொடர்பு விலக்கு

திட்டத்தில் இருந்தால்,

உங்கள் முடிவை உங்கள்

முதலாளியிடம்

தெரிவிக்க வேண்டும்.



